

CARACTERÍSTICAS BHS 202

CRIOFRECUENCIA

FRECUENCIA	500KHz / 800KHz / 1MHz / Mix
CRIOGÉNESIS	Hasta -25°C / -10°C / -5°C
MODOS DE CRIOFRECUENCIA	Multipolar / Monopolar / Mix
ÁREA DE TRATAMIENTO	Cuerpo y Cara (Ojos sin Criofrecuencia)

HImFU

OSILACION DE FRECUENCIA	2.9 MHz - 45 Watts/Cm ²
MODULACIÓN FRECUENCIA	5Hz / 15Hz / 30Hz / 60Hz
SISTEMA DERMOLEDS	624 nm
MODO LEDS	Off / Low / High / Continuo


DermoHealth

VACIO MÁXIMO	200 mBar
FLUJO DE ENERGÍA COMPLETO	45 LTS/MIN.
SISTEMA DERMOLEDS	624 nm
MICRODERMOABRASIÓN	SI

Enygma

APLICADOR INTERNO
Tratamiento del canal vaginal
APLICADOR EXTERNO
Tratamiento vulvar
ESTACIÓN DE DESINFECCIÓN

ANCHO	45 cm.
LONGITUD	50 cm.
ALTURA	200 cm.
PESO	63 kg.
BIOVOLTIOS	198 y 220 volts
FRECUENCIA	50-60 Hz.

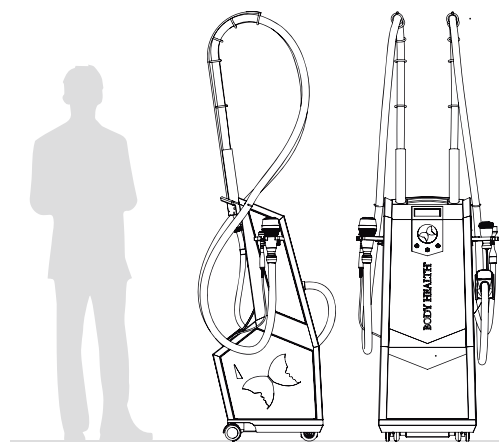

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Body Health Group ha sido premiada por su innovación y desarrollo avanzado de tecnologías estéticas, cuidando cada detalle desde su concepción. Sus productos poseen certificación CE, ISO Medical 13.485 y otras. Presente en más de 35 países dentro de América, Europa, Asia y África, destacándose en naciones como Brasil, México, Rusia y Japón, donde ha ganado un reconocimiento exitoso.



Representante Oficial de Body Health en Chile
Ricardo Matte Pérez 484,
Providencia (Metro Salvador), Santiago
Teléfono: 2 2813 0342 / 2 2313 0861
E-mail: contacto@alla-medical.cl / info@alla-medical.cl
<http://alla-medical.cl>

CrioFrecuencia

Rejuvenecimiento Intimo en 360°



MODELO
BHS 202

El **BHS 202 ENYGMA** es el único equipo capaz de combinar las terapias de *CrioFrecuencia + HImFU Corporal + DermoHealth + Enygma*. Cuenta también con Microdermoabrasión con Diamond Sticks y DermoLeds para uso facial y corporal. Está desarrollado para ser operado solamente por personal debidamente entrenado, incluidos médicos, personal técnico y otros profesionales miembros del equipo clínico subordinados al médico, enfermeros, fisioterapeutas, biomédicos y otros profesionales de la salud debidamente licenciados.




CrioFrecuencia⁺

HImFU⁺ Corporal

DermoHealth⁺

Enygma⁺
X-ORBITAL
TECNOLOGIA

La **CrioFrecuencia** es un avanzado e innovador sistema de shock térmico multifrecuencial de alta potencia (1.050W hasta -25°C en condiciones ideales), que genera un tensado inmediato y duradero en la piel. Es una terapia segura y no invasiva que combina frío (Hasta -25°C) desde el cabezal a la dermis y calentamiento interno de los tejidos corporales (más de 55°C) causado por las ondas de radiofrecuencia multifrecuencial en mono y multipolar en forma simultánea. Esta combinación (frío y calor) causa un *shock térmico* que estimula la síntesis de nuevas fibras de colágeno y elastina como ningún otro procedimiento de tipo no invasivo, produciendo un efecto lifting instantáneo, progresivo y de larga duración en una sola sesión.

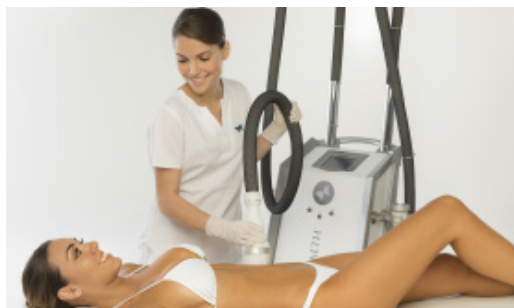

Flacidez, Arrugas y líneas de expresión, Adiposidad, Celulitis, Modelado Corporal.

HImFU Corporal (Ultrasonido de Alta Intensidad Multifocal), es una terapia avanzada, no invasiva, que trabaja a 2.9 Mhz a una profundidad limitada a 2,5 cm, única para el tratamiento de lipólisis. También ofrece la posibilidad de realizar tratamientos reductivos de alta intensidad en distintas frecuencias seleccionables por el terapeuta para distintos tipos de grasa compacta, dura, blanda o celulitis. Los pacientes pueden reducir entre 1 y 3 cm de contorno por sesión obteniendo un increíble efecto de remodelado corporal.




Adiposidad localizada, Modelado Corporal, Celulitis.



DermoHealth es una terapia de vacío diferente a las ofrecidas en el mercado. Es una terapia de succión continua a caudal constante por turbinas (no por bomba), que moviliza los distintos tejidos de la piel, estimulando la microcirculación y facilitando la eliminación de toxinas, generando un drenaje linfático. Es capaz de remodelar y reducir volumen, potenciar la lipólisis en los niveles más profundos de la grasa sin provocar desgarros, flaccidez ni daños en la piel.

DermoLeds es la terapia de succión controlada con bio-fotoestimulación. Su aplicación activa los mecano receptores y foto receptores de la piel estimulando la microcirculación llevando más nutrientes y aumentando la elasticidad de la piel. Descongestiona el tejido celular subcutáneo y estimula las células de colágeno y elastina. Este tratamiento es ideal para arrugas, líneas de expresión, secuelas de acné y para la recuperación post-lifting.

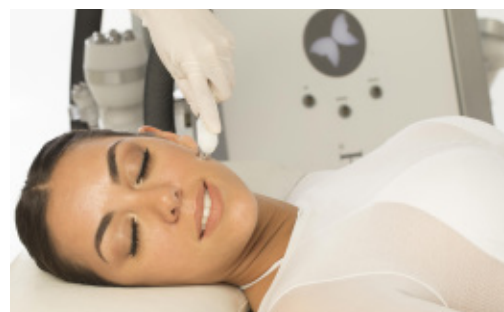

Diamond Stick es el novedoso sistema de microdermoabrasión aséptico por turbina. Es un peeling mecánico limpio, descartable e indoloro que permite una exfoliación segura y controlada de la capa cornea de la piel. Elimina las capas exteriores de células en la piel, manchas, arrugas profundas, secuelas de acné, rejuveneciendo y reparando la piel de manera definitiva.

Celulitis, Adiposidad Localizada, Modelado Corporal, Líneas de Expresión, Cicatrices, Arrugas.



El **ENYGMA X-ORBITAL** es la tecnología segura, rápida y no ablativa para el rejuvenecimiento íntimo en 360°, un gran avance en el tratamiento de la hiperlaxitud vaginal. **ENYGMA no es invasiva, no causa daño y es ambulatoria** dado que no requiere el uso de anestesia ni pabellones, no requiere largos tiempos de recuperación o reposo. Se utiliza una multifrecuencia electromagnética orbital que genera un calentamiento uniforme y controlado por termómetro interno a tiempo real, estimulando la contracción y síntesis de nuevas fibras de colágeno en forma inmediata y duradera.

Mejora la elasticidad vaginal, Reduce la disfunción sexual, Reduce la incontinencia urinaria.