


CARACTERÍSTICAS

LASER CRYSTAL 3D

LONGITUD DE ONDA DEL LASER	755nm, 810nm, 1064nm
TAMAÑO DEL SPOT	12x12mm
ANCHO DE PULSO	10-300MS
FRECUENCIA DE PULSO	1-10HZ
DENSIDAD DE ENERGÍA	10-100J/CM ²
ENERGÍA DE SALIDA	1500W
CERTIFICACIONES	CE, ANMAT, ANVISA

DIMENSIONES

ANCHO	38 cm
LONGITUD	43 cm
ALTURA	110 cm
PESO	52 Kg

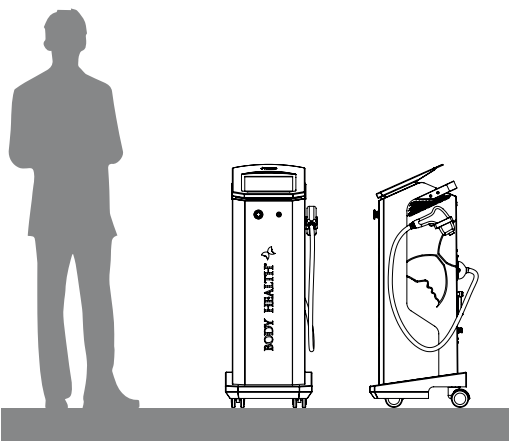

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA

Body Health Group ha sido premiada por su innovación y desarrollo avanzado de tecnologías estéticas, cuidando cada detalle desde su concepción. Sus productos poseen certificación CE, ISO Medical 13.485 y otras. Presente en más de 35 países dentro de América, Europa, Asia y África, destacándose en naciones como Brasil, México, Rusia y Japón, donde ha ganado un reconocimiento exitoso.

RESPONSABILIDAD DE USO

LASER CRYSTAL 3D está desarrollado para ser operado solamente por personal debidamente entrenado, incluidos médicos, personal técnico y otros profesionales miembros del equipo clínico subordinados al médico, enfermeros, fisioterapeutas, biomédicos y otros profesionales de la salud debidamente licenciados.



Representante Oficial de Body Health en Chile
Ricardo Matte Pérez 484,
Providencia (Metro Salvador), Santiago
Teléfono: 2 2813 0342 / 2 2313 0861
E-mail: contacto@alla-medical.cl / info@alla-medical.cl
<http://alla-medical.cl>

LASER Crystal 3D

EVOLUCIONA EN 3 DIMENSIONES

ALEXANDRITA
755nm

DIODO
810nm

YAG
1064nm



LASER Crystal 3D

El nuevo **LASER CRYSTAL 3D** es la alternativa más eficaz en depilación láser para clínicas de vanguardia. Mezcla los beneficios de las 3 longitudes de ondas mundialmente conocidas en estética, logrando resultados antes impensables. **LASER CRYSTAL 3D** ofrece tratamientos de alta gama con resultados en cualquiera de las longitudes de onda. *Seguro, Eficaz, y Placentero.*



VENTAJAS LASER CRYSTAL 3D

El **LASER CRYSTAL 3D** opera con la última tecnología en depilación combinada de *origen europeo y japonés*. Cuenta con **CryoCooling** de Body Health, sistema de refrigeración sinérgico que genera un efecto anestésico y protector en la epidermis.

- Eficacia clínicamente comprobada.
- Espectro extra de emisión para depilación láser.
- Procedimientos más rápidos, seguros y placenteros.
- Para todo tipo de pieles, incluso bronceadas.
- Perfecto para cualquier área del cuerpo.
- Tecnología con los mejores resultados del mercado.
- Sistema de refrigeración CryoCooling.

Hasta 90% de Efectividad
LASER CRYSTAL 3D es tres veces más potente que otros tipos de láser.

EVOLUCIÓN EN 3 DIMENSIONES

CRYSTAL
Alexandrita
755nm

- Ofrece la mejor absorción de energía por el cromóforo melanina.
- Brinda excelentes resultados en **pelo fino** y de **color claro**.
- Especialmente eficaz para vellos superficiales (cejas o el labio superior).

CRYSTAL
DIODO
810nm

- Potencia media-alta para realizar tratamientos de forma **rápida**.
- Su profunda capacidad de penetración lo posiciona en el tratamiento ideal para las áreas de los brazos, piernas, mejillas y la barba.
- Muy **efectivo** y seguro para el tratamiento de pieles oscuras.

CRYSTAL
Nd Yag
1064nm

- Enfocado en tratar las pieles más **oscuras y bronceadas**.
- Ofrece la penetración más profunda del haz de luz, permitiendo tratar el vello incrustado en cuero cabelludo, brazos y áreas púbicas.
- Su mejor absorción por el cromóforo acuoso genera una temperatura más alta, aumentando su **potencia**.

